


Para garantizar la vida útil y el buen estado de los productos marca LOS PINOS es necesario seguir las siguientes instrucciones de uso

CONTROLES CAMILLA DE OPERACIÓN MANUAL




Accionador Espaldar

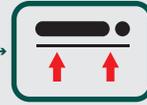

Ascenso
Camilla



Trendelenburg

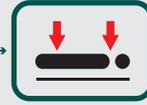

Descenso
Camilla



Trendelenburg
Inverso

FRENO



FRENO



LIBRE



DIRIGIR



Para desplazar la camilla asegúrese que no esté frenada, además desconecte el suministro eléctrico.

BARANDAS



Sujete la baranda y presione la platina accionadora ubicada debajo del tendido en centro de la camilla.

Descienda la baranda hasta que esta quede guardada debajo del tendido.

Para subir las barandas hale hacia arriba hasta que estas aseguren firmemente en el trinquete.



PRECAUCIÓN!

1. Posición segura de ingreso y egreso de paciente: Camilla en Altura Mínima.
2. Antes de realizar cualquier movimiento verifique que el atril portasuero no choque con ningún objeto, pared o techo.
3. Siempre asegúrese que no hayan obstáculos (personas, objetos, accesorios, entre otros), antes de cualquier movimiento de la camilla.
4. La camilla debe tener las barandas arriba siempre que se encuentre en uso.
5. Para la correcta limpieza de la camilla siga las instrucciones al respaldo.

Para garantizar la vida útil y el buen estado de los productos marca LOS PINOS es necesario seguir las siguientes recomendaciones de limpieza.



Utilizar químicos de limpieza a base de:

- a. Peróxido Orgánico.
- b. Ácido Acético.
- c. Biguadina Polimérica.
- d. Tensoactivos Aniónicos.



NUNCA UTILIZAR

- a. Cloro.
- b. Hipoclorito.
- c. Amonios Cuaternarios.
- d. Alcalino Clorado.

1. Seguir las instrucciones de correcta titulación del químico dadas por el fabricante del mismo (% de concentración).

2. Bajo ninguna circunstancia aplique los químicos *sin ser diluidos*.

3. Humedecer (sin saturar) un paño limpio con el químico a utilizar. Verifique que este no quede goteando.

4. Aplicar el producto sobre las zonas de mayor contacto con el paciente y/o los agentes contaminantes.

5. Dejar reposar por un tiempo no mayor a 1 minuto.



6. Con un paño seco (diferente al inicial) remover el exceso de químico dejando las superficies completamente secas.

7. En caso de tener desprendimiento de pintura por cualquier causa, comuníquese con **LOS PINOS** para realizar la reparación y evitar oxidación química.

8. En caso de identificar una mancha de óxido sin desprendimiento de pintura, humedezca un paño con agua y frote con fuerza hasta eliminar la mancha superficial. Verifique que la superficie quede completamente seca.

9. No realice la limpieza del equipo utilizando elementos a presión. (Mangueras o hidrolavadoras).

10. Para la limpieza de los componentes electrónicos, desconecte el equipo y limpie con un paño húmedo, garantizando que no se almacenen líquidos dentro de las conexiones. Con un paño seco (diferente al inicial) remover el exceso de químico dejando las superficies completamente secas.

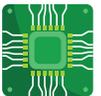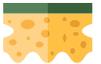

En caso de presentar novedades con las protecciones superficiales o componentes comuníquese con **Industrias Metálicas Los Pinos**. No seguir las recomendaciones indicadas podría causar la pérdida de garantía del equipo.

CONTACTO

PBX: (57 604) 372 30 31

Línea Gratuita Nacional 01 8000 180 654

Chatee con nosotros en www.lospinos-sa.com

Escríbanos a serviciotecnico@lospinos-sa.com

**LÍNEA
DYNAMIC**